



NAUSICAA
arredi inox pluridisciplinari
multi-disciplinary
stainless steel medical furniture



VINCA[®]

Forniture Ospedaliere dal 1952

ATTREZZATURE OSPEDALIERE
HOSPITAL EQUIPMENT

Il programma di arredi inox pluridisciplinari nasce ed è destinato a risolvere i problemi organizzativi e di servizio in vari reparti tali come: sale operatorie, pronto soccorso, pre-anestesia e risveglio, terapia intensiva, ambulatori, locale caposala/ medici, armamentari, centrali di sterilizzazione, endoscopie e sale gessi. Comprende armadiature, sopralzi, pensili, banchi lavello, banchi armadiati, gamma di accessori (pistole acqua jet, barra reggiscala, scala, ecc.)


La versatilità dei moduli è tale da consentire di trovare la soluzione idonea per qualsiasi tipo di ambiente.

L'efficienza operativa è garantita tramite l'utilizzazione di contenitori a rete e vaschette in metacrilato ottimizzando l'uso dello spazio.

La qualità e la flessibilità in rapporto ad un prezzo competitivo sono l'obiettivo della nuova serie di arredi.

La robustezza e la resistenza all'uso prolungato nel tempo, l'ottima resistenza all'abrasione ed ai detergenti, sono vantaggi eccellenti, soprattutto nell'utilizzazione delle aree bagnate.

La sterilità del sistema combinata con una facilità di pulizia rendono il sistema ottimo per l'utilizzo in tutti gli ambienti sterili ospedalieri.

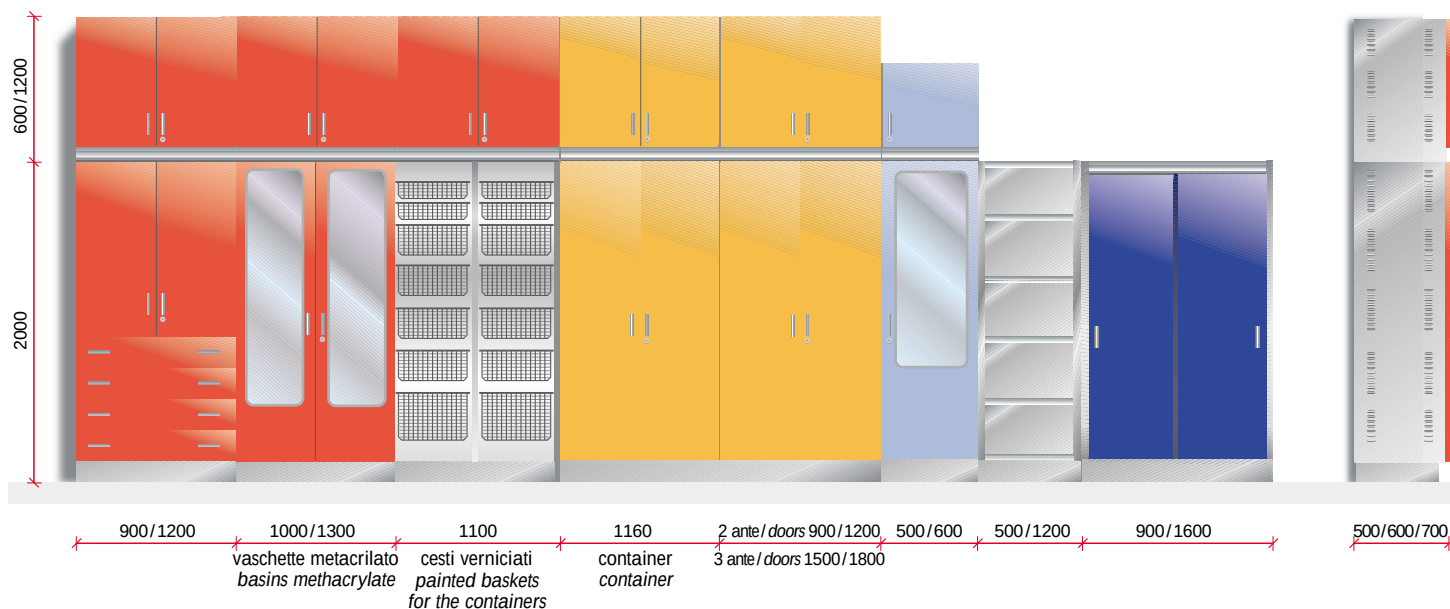

CARATTERISTICHE:


scocche:	In acciaio inox AISI 304 (EN:X5 CrNi 18-10) spessore 10/10. Con superfici pulibili, chiuse da tutti i lati tranne i lavelli che sono aperti sul retro per gli allacciamenti tecnici, corodate di cremagliere di regolazione altezza ripiani interni.
piedini:	Realizzati in tubolare sez. mm. 40x40 poggiati su omega di rinforzo sp. 15/10. Regolabili in altezza tramite supporto finale in plastica nera.
ante scorrevoli:	In acciaio inox AISI 304 (EN:X5 CrNi 18-10) spessore 8/10 tamburate con materiale fonoassorbente. Scorrevoli su guida in alluminio.
ante battente:	In acciaio inox AISI 304 (EN:X5 CrNi 18-10) spessore 8/10 con materiale fonoassorbente all'interno. Cerniere Salice aperture 180°. Dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave. Saldate sugli spigoli.
chiusure:	Serratura con chiave estraibile e cilindro sostituibile, dotata di barretta laterale di chiusura per banchi e pensili; dotata di aste rotanti + perni di chiusura eccentrici per armadi alti.
cassetti:	Estraibili totalmente e montati su guide con cuscinetti, sganciabili per pulizia, con guarnizione di tenuta. Saldati sugli spigoli.
maniglie:	In ottone con finitura cromo lucido.
piani superiori:	In acciaio inox AISI 304 (EN:X5 CrNi 18-10) spessore 15/10 rinforzati con omega sp. 15/10. Completamente saldati e ripassati finemente, senza spigoli e senza punti non perfettamente pulibili e disinfettabili. Rinforzati con supporti inox, senza utilizzazione di materiali degradabili nel tempo (legno, truciolare, ferro zincato ecc.).
corian®	Piani corian® disponibili a richiesta.
ripiani intermedi:	In acciaio inox AISI 304 (EN:X5 CrNi 18-10) spessore 10/10 rinforzati con omega sp. 15/10. Regolabili in altezza.
zoccoli:	In acciaio inox AISI 304 (EN:X5 CrNi 18-10) spessore 10/10 asportabili o fissi sigillabili a pavimento, agganciati ai piedini tramite molle inox.
vasche:	Stampate in acciaio inox AISI 304 (EN:X5 CrNi 18-10) spessore 6/10 complete di pileta e tubi troppopieno. Vasche su misura disponibili.
vetri:	Visarm sp. 6 mm. trasparenti.
verniciatura:	A richiesta tutti gli arredi sono disponibili in versione con ante e frontali cassetti in inox verniciato (lato esterno verniciato, interno finitura SB). E' disponibile anche la versione con corpo interno ed esterno verniciato. La verniciatura comprende il lavaggio e lo sgrassaggio delle superfici, fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica.
colori:	Sono disponibili 7 colori RAL a catalogo, su richiesta è possibile eseguire tutti i colori RAL o effettuare verniciature a campione fornito dal cliente.
dimensioni:	Il programma di arredamenti modulari è stato progettato interamente con l'ausilio di un sistema CAD tridimensionale di ultima generazione, (CAD parametrico e associativo) che permette di generare oltre ai moduli standard a listino qualsiasi esecuzione a misura per soddisfare ogni esigenza del cliente.
cestelli:	Sono disponibili due tipi di cestelli interni: A) cestelli a rete realizzati in acciaio verniciato epossidico bianco dimensioni mm. 427x527x 85 h. dimensioni mm. 427x527x185 h. dimensioni mm. 427x527x285 h. B) vaschette in metacrilato trasparente, scorrevoli su guide in materiale plastico dimensioni mm. 600x400x 50 h. dimensioni mm. 600x400x100 h. dimensioni mm. 600x400x150 h. Divisori interni e portaetichette.

The multi-disciplinary furniture program is designed to solve organisation and service related problems in hospital wards such as operating theatres, emergency wards, pre-anaesthesia and recovery rooms, intensive care, consulting rooms, head nurse/physicians' rooms, medical equipment, sterilisation, endoscopy and plaster rooms. It includes cabinets, additional storeys, hanging shelves, sinks, storage cupboards, range of fittings (water jet pistols, ladder support bars, ladder etc.)

The versatility of these modules allows you to find the right solution for any type of room. Operating efficiency is ensured by methacrylate net containers and basins to optimise the use of space.

Quality and flexibility at a competitive price are the aim of this new range of furnishings. Sturdiness and resistance over time, excellent resistance to abrasion and detergents are great advantages, especially when used in wet areas.

System sterility combined with easy cleaning make the system suitable for use in all sterile hospital environments.

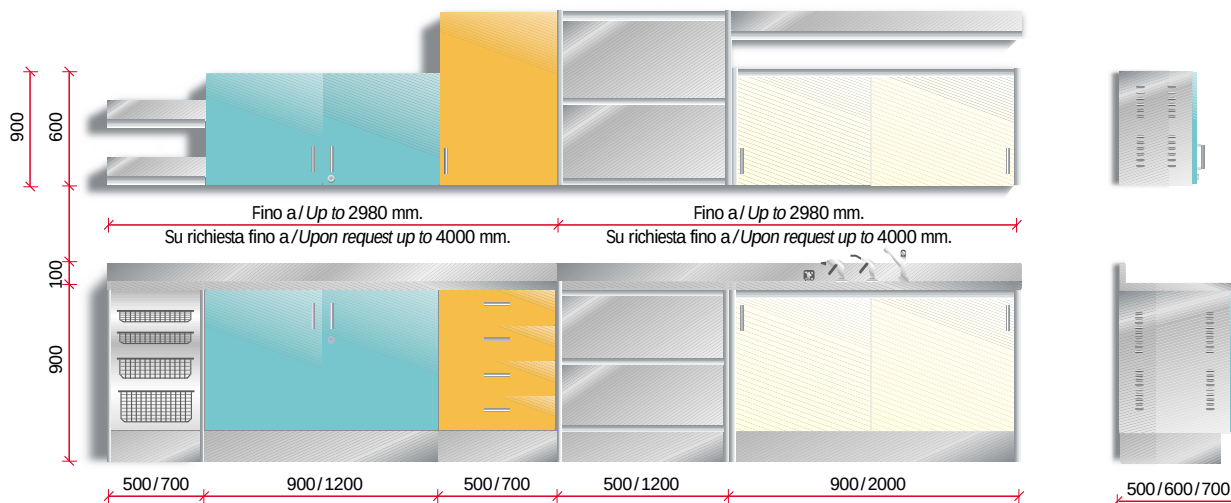

SPECIFICATIONS:

frames:	AISI 304 stainless steel (EN:X5 CrNi 18-10), thickness 10/10. Washable surfaces, closed on all sides except for sinks which are open on the back for technical connections, provided with rack-rails allowing adjustment of shelf height.
feet:	Made of tubular frame 40x40 mm resting on omega reinforcement, thickness 15/10. End support made of black plastic for height adjustment.
sliding doors:	AISI 304 stainless steel (EN:X5 CrNi 18-10), thickness 8/10, double-panelled with soundproof material. Sliding doors on aluminium rails.
swing-doors:	AISI 304 stainless steel (EN:X5 CrNi 18-10), thickness 8/10, with soundproof material inside. Salice hinges, with 180° opening. Fitted dust-proof rubber profile and key lock. Welded on the corners.
closings:	Lock with removable key and replaceable cylinder, fitted with side lever latch for benches and hanging shelves; provided with rotating rods + eccentric closing pins for high lockers.
drawers:	Completely extractable, assembled on rails with bearings, easily dismantling for cleaning operations; dust-proof sealed. Welded on the corners.
handles:	Brass with polished chromium finishing.
upper shelves:	AISI 304 stainless steel (EN:X5 CrNi 18-10), thickness 15/10 with omega reinforcement, thickness 15/10. Completely welded and ground smooth, no sharp edges. All parts can be washed and disinfected. Reinforced with stainless steel supports without using degradable materials (i.e. wood, chipboard, galvanised iron, etc.).
corian®	Corian® shelves available upon request.
intermediate shelves:	AISI 304 stainless steel (EN:X5 CrNi 18-10), thickness 10/10 with omega reinforcement, thickness 15/10. Height adjustable.
socles:	AISI 304 stainless steel (EN:X5 CrNi 18-10), thickness 10/10 removable or fixed to be welded to the floor, feet connected by stainless steel springs.
basins:	Moulded in AISI 304 stainless steel (EN:X5 CrNi 18-10), thickness 6/10 provided with drain and overflow tubes. Made to measure also available.
glasses:	Visarm, thickness 6 mm., transparent.
painting:	Upon request all items are available with doors and front drawers in painted stainless steel (i.e., painted exterior, inside SB finishing). Version painted on both sides also available. Painting includes surface washing and degreasing treatment, epoxy priming and double polyurethane painting.
colours:	7 RAL colours available as standard, all RAL colours can be supplied on request as well as special painting according to the client's sample.
dimensions:	The entire modular elements program has been designed using the latest in 3D CAD systems (parametric and associative CAD) which in addition to creating standard modules creates made to measure versions to satisfy the client's every need.
baskets:	Two types of inner baskets are available: A) net baskets made of steel with white epoxy coating dimensions mm. 427x527x 85 h. dimensions mm. 427x527x185 h. dimensions mm. 427x527x285 h. B) transparent methacrylate basins, sliding on plastic rails dimensions mm. 600x400x 50 h. dimensions mm. 600x400x100 h. dimensions mm. 600x400x150 h. Inner dividers and label-holders.



- ▲ Composizione con armadi a ripiani e armadi con vaschette estraibili in metacrilato
 ▼ Composition of shelved cabinets and cabinets with extractable methacrylate basins





- ^ Armadiature di deposito
- con ripiani
 - con vassoi portacontainers
 - con vaschetta in metacrilato
 - con cesti a rete verniciati

Store cabinets

- with shelves
- with trays for containers
- with methacrylate basin
- with painted net baskets

- ^ Armadio con vassoi estraibili in Aisi 304, porta containers

Cabinet with extractable Aisi 304 trays in, for containers



- ^ Dettaglio vassoi estraibili in Aisi 304, porta containers
- Detail of extractable Aisi 304 trays, for containers*



- ^ Composizione per locale risveglio/preparazione con moduli vaschette in metacrilato
Composition for recovery/preparation room with methacrylate basins
- v Banco lavaggio per sterilizzazione/substerilizzazione con vasca lavaggio ultrasuoni
Washing table for sterilisation/sub sterilisation with ultrasound washer





Composition
with storage compartments
and endoscope cabinets
with RUV lamps

*Composition
of storage
compartments and
endoscope cabinets
with RUV lamps*



Detail with Corian®
(Dupont)

Detail with Corian® surface (Dupont)



Detail of basin compartment
in transparent methacrylate

*Detail of basin compartment
in transparent methacrylate*

Gamma completa di colori Full range of colours



bianco perla
pearl-white
RAL 1013



giallo zafferano
saffron-yellow
RAL 1017



arancio salmone
salmon-orange
RAL 1012

Esteticamente gradevole, la gamma di colori contribuisce a valorizzare l'immagine della vostra azienda.
Attractive, the range of colours improves the image of your company.



blu pastello
pastel blue
RAL 5024



blu oltremare
ultramarine blue
RAL 5002



verde chiaro
light green
RAL 6027



grigio luce
light grey
RAL 7035

Disponibile per corpo mobile.
Available for body cabinet.



▲ Esempi di composizioni per substerilizzazione ed endoscopia
 ▼ Examples of structures for sub sterilisation and endoscopy





▲ Composizione per
substerilizzazione

*Structure for sub
sterilisation*

▲ Cucinetta di reparto

Ward kitchen



▲ Dettaglio anta e serratura
Detail of door and lock



▲ Vano sottobanco con
vaschette in metacrilato
*Compartment under the
bench with methacrylate
bowls*



▲ Dettaglio cassette estraibili su
guide con cuscinetti

*Detail of extractable drawers on
rails with bearings*



< Armadio
con ripiani
regolabili

*Locker with
adjustable
shelves*

> Dettaglio
ripianti interni
regolabili

*Detail of
adjustable
inner shelves*



✓ Armadio con cesti a rete
verniciati

Locker with painted net trays



✓ Composizione per
sterilizzazione/substerilizzazione

Structure for sterilisation/sub sterilisation



sala gessi endoscopia plaster room endoscopy




▲ Armadio portaendoscopi neutro
Endoscope cabinet, neutral



▲ Armadio portaendoscopi con lampade germicida
Endoscope cabinet with germicidal lamps



▲ Dettaglio sistema di aggancio endoscopi
Detail of endoscope hooking system

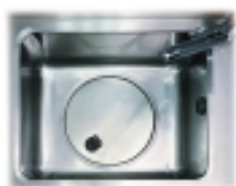

▲ coperchio cover



▲ filtro filter



▲ vasca sink



▲ Vasca lavaggio endoscopi
Endoscope washer



▲ Dettaglio vasca per endoscopi
Detail of endoscope washer



Forniture Ospedaliere dal 1952



Circ.ne Casilina n. 131 - 135, 00176 - Roma (RM)

tel. +39 06.2752136 fax. +39 06.21702993 e-mail. info@vincal.it www.vincal.it