

The Vincal logo is a stylized blue 'V' followed by the word 'INCAL' in a bold, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'V'.

Forniture Ospedaliere dal 1952

**CARRELLI E ACCESSORI
PER SALE OPERATORIE**

**TROLLEYS AND ACCESSORIES
FOR OPERATING ROOMS**



Circ.ne Casilina n. 131 - 135, 00176 - Roma (RM)

tel. +39 06.2752136 fax. +39 06.21702993 e-mail. info@vincal.it www.vincal.it



► **CARRELLO PORTA SACCO
CON APERTURA A PEDALE
DEL COPERCHIO**

Carrello in lega leggera. Anello superiore munito di particolari in gomma antisdrucciolo. Comando a pedale del coperchio in plastica. N. 4 ruote Ø 80.
• Versione ad un posto sacco.
Dimensioni mm. 370x370x880 h.
• Versione a due posti sacco.
Dimensioni mm. 740x370x880 h.
• Versione a tre posti sacco.
Dimensioni mm. 1110x370x880 h.
E' disponibile anche in versione con anello elastico per sacco in plastica.

● **BAG TROLLEY
WITH COVER
OPENING PEDAL**

Light alloy trolley. Upper ring fitted with details in non-slip rubber. Pedal controlled plastic cover. no. 4 80 Ø wheels.
• One bag version
Size 370x370x880h mm.
• Two bag version
Size 740x370x880h mm.
• Three bag version
Size 1110x370x880h mm.
A version with an elastic ring for plastic bags is also available.



► **CARRELLO PER
BIANCHERIA SPORCA
DISEGNO N. 98CF057**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Vasca di contenimento a tenuta. Coperchio superiore ribaltabile incernierato a tenuta con n. 2 fermi a moschettone di chiusura. Paraurti agli angoli. N. 4 ruote Ø 200 di cui n. 2 fisse e n. 2 girevoli. Maniglia direzionale. Finitura scotch brite.
Dimensioni mm. 900x650x850 h.

● **DIRTY LAUNDRY
TROLLEY
DRAWING N° 98CF057**

Made of AISI 304 18/10 stainless steel. Sealed container trough. Sealed hinged tilting upper cover with no. 2 closing spring clips. Bumpers at the corners. no. 4 200 Ø antistatic wheels of which no. 2 fixed and no. 2 revolving. Steering handle. ScotchBrite finish. Size 900x650x850h mm.



► **CARRELLO PORTA
BIANCHERIA
PULITA/SPORCA
DISEGNO N. 98CF062**

Realizzato in acciaio inox 18/8 AISI 304. Diviso in due zone.
• N. 1 zona (sporca) con anello portasacco chiuso da coperchi in materiale plastico.
• N. 1 zona armadiata con n. 2 vani chiusi con portine ribaltabili a scomparsa. Pianale portante di forte spessore. Paraurti ai quattro angoli. N. 4 ruote Ø 125 di cui due fisse e due girevoli. Maniglia direzionale. Finitura scotch brite.
Dimensioni mm. 1100x650x1000 h.

● **CLEAN/DIRTY
LAUNDRY TROLLEY
DRAWING N° 98CF062**

Made of AISI 304 18/8 stainless steel. Divided into two areas.
• no. 1 area (dirty) with bag fixing ring, closed at the top by a plastic cover.
• no. 1 cupboard area with no. 2 cupboards closed by foldaway tilting hatches. Thick carrying platform. Bumpers at the four corners.
no. 4 125 Ø wheels of which two fixed and two revolving. Steering handle. ScotchBrite finish.
Size 1100x650x1000h mm.



► **CARRELLO PORTA
BIANCHERIA
PULITA/SPORCA
DISEGNO N. 99CF002**

Realizzato in acciaio inox 18/8 AISI 304. Diviso in due zone.
• N. 1 zona (sporca) con 2 anelli portasacchi chiuso da coperchi in materiale plastico.
• N. 1 zona armadiata con n. 2 vani chiusi con portine ribaltabili a scomparsa. Pianale portante di forte spessore. Paraurti ai quattro angoli. N. 4 ruote Ø 125 di cui due fisse e due girevoli. Maniglia direzionale. Finitura scotch brite. Dimensioni 1500x650x1000 h.

● **CLEAN/DIRTY
LAUNDRY
TROLLEY
DRAWING N° 99CF002**

Made of AISI 304 18/8 stainless steel. Divided into two areas.
• no. 1 area (dirty) with no. 2 bag fixing rings, closed at the top by plastic cover.
• no. 1 cupboard area with no. 2 cupboards closed by foldaway tilting hatches. Thick carrying platform. Bumpers at the four corners. no. 4 125 Ø wheels of which two fixed and two revolving. Steering handle. ScotchBrite finish. Size 1500x650x1000h mm.



► **CARRELLO
PER MEDICAZIONE
MODELLO CF/4315**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Costituito da n. 2 ripiani fissi spessore 12/10 perimetralmente bordati. N. 1 ripianetto forato porta boccette Ø 65. N. 1 porta catino girevole in tondino Ø 7 completo di catino in acciaio inox Ø 220. Struttura portante formante anche maniglia in tubolare Ø 25. Montaggio su n. 4 ruote Ø 125 girevoli. Finitura satinata. Dimensioni mm. 800x500x800 h.

● **MODEL CF/4315
MEDICATION TROLLEY**

Made of AISI 304 18/10 stainless steel. Consisting of no. 2 fixed shelves 12/10 thick with bordered edges, no. 1 small drilled shelf for holding 65 Ø vials, no. 1 tilting refuse container of approx. 300x200x300h mm, no. 1 rotating bowl holder in 7 Ø metal rod complete with 220 Ø stainless steel bowl. 25 Ø tubular support structure with incorporated handle. Assembled on no. 4 125 Ø revolving wheels. Brushed finish. Size 800x500x800h mm.



► **CARRELLO PER
MEDICAZIONE
MODELLO 304**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Piano superiore con tre sedi per inserimento di cestelli sterilizzatori (non di nostra fornitura). N. 3 bacinelle estraibili e piano laterale ribaltabile, ripiano intermedio. N. 3 cassetti a tramoggia da mm. 200x200x340 h. di profondità. N. 4 ruote Ø 160. Maniglia direzionale in tubolare inox Ø 25. Finitura satinata. Dimensioni mm. 1150x600x900 h.

● **MEDICATION
TROLLEY
DRAWING N° 304**

Made entirely of AISI 304 18/8 stainless steel. Upper shelf with three housings for sterilising baskets (not supplied by us). No. 3 extractable basins with tilting side shelf. Intermediate shelf. No. 3 200x200x340h depth hopper boxes. No. 4 160 Ø wheels. 25 Ø stainless steel steering handle. Brushed finish. Size 1150x600x900h mm.



► **CARRELLO SERVITORE
SOLLEVABILE
MODELLO CF/2715**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Piano superiore perimetralmente bordato spessore 12/10 con asta di sollevamento in tondo pieno. Maniglia di bloccaggio. Struttura portante in tubolare Ø 1". Montaggio su ruote semisferiche Ø 80. Finitura lucida. Dimensioni mm. 650x400x800/1200 h.

● **MODEL CF/2715
LIFTABLE SERVING
TROLLEY**

Made of AISI 304 18/8 stainless steel. Upper shelf 12/10 thick with bordered edge and full round lifting rod. Locking handle. 1" Ø tubular support structure. Assembled on 80 Ø semi-spherical wheels. Bright finish. Size 650x400x800/1200h mm.



► **CARRELLO SERVITORE
PER SALA OPERATORIA
DISEGNO N. A0363**

Realizzato in parte in inox ed in parte in lega leggera. Piano superiore con vassoio estraibile da mm. 700x450x30 h. Elevazione con pompa a sollevamento oleodinamico. Supporto inferiore in lega leggera a sbalzo zavorrato. Elevazione da mm. 900 a 1250 h. Finitura lucida/satinata/verniciata. Dimensioni mm. 700x450x900/1250 h.

● **SERVING TROLLEY FOR
OPERATING THEATRE
DRAWING. N° A0363**

Made partly of stainless steel and partly of light alloy. Upper shelf with 700x450x30h extractable tray. Lifting with hydraulic lifting pump. Ballasted cantilevered light alloy lower support. Elevation from 900 to 1250h. Bright/brushed/painted finish. Size 700x450x900/1250h mm.



► **TAVOLO PORTAFERRI
CHIRURGICI CON E SENZA
SOPRALZO MODELLO
CF/4407-S E CF4407**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Piano superiore liscio spessore 15/10 da mm. 1500x700. Struttura portante in tubolare Ø 25 formante anche la struttura superiore portateli.
N. 4 ruote Ø 65 semisferiche girevoli.
Dimensioni mm. 1500x700x850+400 h.

● **MODEL CF/4407-S CF 4407
SURGICAL INSTRUMENT TABLE
WITH/WITHOUT
RAISED SHELF**

Made of AISI 304 18/10 stainless steel. 1500x700 mm smooth upper surface 15/10 thick. 25 Ø tubular support structure also forming the raised clothholder shelf. no. 4 65 Ø revolving semi-spherical wheels. Size 1500x700x850+400 h mm.



► **CARRELLO
PER ANESTESIA
DISEGNO N. 99CF015**

Realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano superiore con alzatina su tre lati. Zona sottostante chiusa perimetralmente su tre lati.
Diviso in due zone:
• N. 1 zona a sinistra con n. 6 cassetti estraibili.
• N. 1 zona a destra con n. 3 vano a giorno e n. 1 cassetto estraibile.
N. 4 ruote Ø 125 antistatiche di cui n. 2 fisse e n. 2 girevoli con blocco. Maniglia direzionale Ø 20.
Mensola superiore bordata sui tre lati. Tramoggia portarifiuti dimensioni mm. 290x200x400 h. Finitura satinata.
Dimensioni mm. 750x520x1050 +250 h.

● **ANAESTHETICS
TROLLEY
DRAWING N° 99CF015**

Made of AISI 304 stainless steel. Top surface with riser on three sides. Area below closed externally on three sides. Divided into two areas:
• no. 1 area on the left with no. 6 removable drawers.
• no. 1 area on the right with no. 3 open compartments and no. 1 removable drawer. no. 4 125 Ø antistatic wheels of which no. 2 fixed and no. 2 revolving with brake. 20 Ø steering handle. Upper bracket bordered on three sides. Refuse container size 290x200x400h mm. Brushed finish.
Size 750x520x1050 + 250h mm.



► **CARRELLO
PER EMERGENZE
DISEGNO N. A0367**

Realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano superiore liscio con alzatina su tre lati.
Zona sottostante chiusa su tre lati. Sul frontale n. 6 cassetti estraibili inox con chiusura. Maniglia direzionale.
N. 4 ruote Ø 125 girevoli di cui due con blocco. Finitura satinata. Dimensioni mm. 700x500x900 h.

● **EMERGENCY
TROLLEY
DRAWING N° A0367**

Made of AISI stainless steel. Smooth top surface with riser on three sides. Area below closed on three sides. no. 6 removable stainless steel drawers with lock on the front. Steering handle. no. 4 125 Ø revolving wheels of which two with brake. Brushed finish. Size 700x500x900h mm.



▶ ARMADIO CARRELLATO PORTA CONTAINER

Realizzato completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 10-12/10. Chiuso perimetralmente su tre lati. Sul frontale n. 1 portina a battente tamburata antipolvere con chiusura. Portine apribili a 260°. Internamente 1 o 2 ripiani. N. 4 ruote inox piastra girevole con blocco Ø 150 antistatiche. Dotato di maniglia direzionale e paraurti perimetrali. Finitura satinata fine.

• **Modello 2690** dotato di n. 1 ripiano atto a contenere n. 6 container dimensioni mm. 600x300x300 h. Dimensioni dell'armadio mm. 1120x700x1060 h.

• **Modello 2691** dotato di n. 2 ripiani atto a contenere n. 9 container dimensioni mm. 600x300x300 h. Dimensioni dell'armadio mm. 1120x700x1360 h.

Armadio modello 2690 e 2691 con ruote in acciaio zincato.

● CONTAINER CABINET WITH WHEELS

Totally made of AISI 304 18/10 stainless steel 10-12/10 thick.

Closed externally on three sides. no. 1 dustproof drummed stile hatch with lock on the front.

Hatches opening to 260°. 1 or 2 shelves inside. no. 4 150 Ø antistatic stainless steel revolving plate wheels with brake. Fitted with steering handle and all-round bumpers. Fine brushed finish.

• **Model 2690** fitted with no. 1 shelf for holding no. 6 containers size 600x300x300h mm.

Cabinet size 1120x700x1060h mm.

• **Model 2691** fitted with no. 2 shelves for holding no. 9 containers size 600x300x300h mm.

Cabinet size 1120x700x1360h mm.

Mod. 2690 and 2691 cabinet with galvanised steel wheels.

▶ CARRELLO PORTACONTAINER DISEGNO N.99CF013

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Piano superiore liscio spessore 12/10. Zona sottostante aperta a giorno. Struttura portante in tubolare quadro inox 30x30x1,2 spessore. N. 2 ripiani di cui uno bordato su tre lati e n. 1 liscio. N. 4 ruote Ø 125 di cui due fisse e due girevoli con freno antistatiche.

Dimensioni mm. 660x660x850 h.

● CONTAINER TROLLEY DRAWING N° 99CF013

Made of AISI 304 18/10 stainless steel.

Smooth top surface 12/10 thick. Open area below. 30x30x1.2 thick square stainless steel tubular support structure. no. 2 shelves of which one bordered on three sides and no.

1 smooth. no. 4 125 Ø antistatic wheels of which two fixed and two revolving with brake.

Size 660x660x850h mm.

▶ CARRELLO PORTACONTAINER DISEGNO N.99CF014 CON STRUTTURA PORTATELO

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Piano superiore liscio spessore 12/10. Zona sottostante aperta a giorno. Struttura portante in tubolare quadro inox 30x30x1,2 spessore. N. 2 ripiani di cui uno bordato su tre lati e n. 1 liscio. Struttura superiore portatelo in tubo inox Ø 10 asportabile. N. 4 ruote Ø 125 di cui due fisse e due girevoli con freno antistatiche.

Dimensioni mm. 660x660x850 h.

● CONTAINER TROLLEY DRAWING N° 99CF014 WITH CLOTH-HOLDER STRUCTURE

Made of AISI 304 18/10 stainless steel. Smooth top surface 12/10 thick.

Open area below. 30x30x1.2 thick square stainless steel tubular support structure. No. 2 shelves of which one bordered on three sides and no. 1 smooth.

10 Ø stainless steel tube removable upper cloth-holder structure. no. 4 125 Ø antistatic wheels of which two fixed and two revolving with brake. Size 660x660x850h mm.



► **CARRELLO
PORTA ZOCCOLI
DISEGNO N. 97CF018**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304.
Piani porta zoccoli realizzati in tubolare
quadro con traversini in tondino inox Ø 8.
N. 4 ruote Ø 80 girevoli. Finitura satinata.
Dimensioni mm. 1000x350x1500 h.

● **SLIPPER
TROLLEY
DRAWING N° 97CF018**

Made of AISI 304 18/8 stainless steel. Slipper
holder shelves made of square tubing with
8 Ø stainless steel rod supports.
no. 80 Ø revolving wheels. Brushed finish.
Size 1000x350x1500h mm.



► **RASTRELLIERA PORTA
ACCESSORI
DISEGNO N. 99VA013**


Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304.
Coppia di listelli con ganci multipli di
supporto.

- Coppia di listelli
- Cestelli a filo inox mm. 580x280x135
- Griglia porta zoccoli (6 posti)
- Mensole
- Mensole con cassetti
- Mensole con catgutiera.

● **ACCESSORIES
RACK
DRAWING N° 99VA013**

Made of AISI 304 18/10 stainless steel.
Pair of fillets with multiple support clips.

- Pair of fillets
- 80x280x135 mm stainless steel wire
baskets
- Slipper grid (six places)
- Shelves
- Shelves with drawers
- Shelves with cut-gut unit.

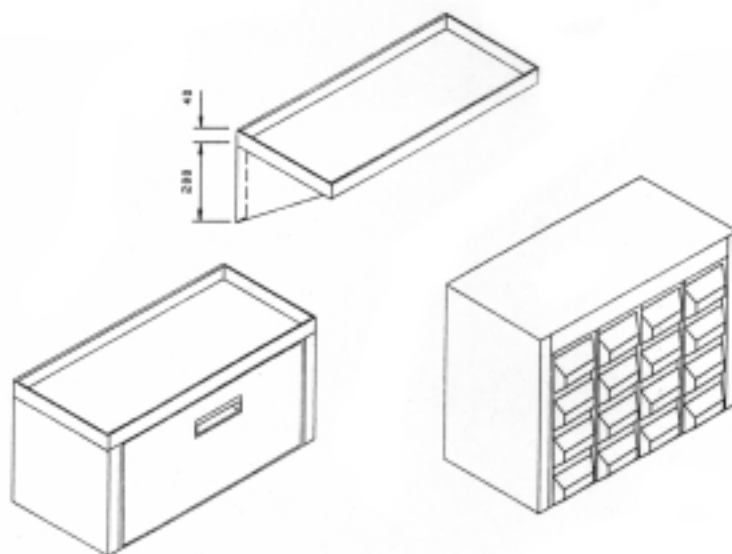

► **CARRELLO
PORTA OSSIMETRO
DISEGNO N. 99CF016**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304.
Così composto:

Parte superiore con piano liscio spessore
12/10 corredo di mensola di appoggio
con bordino.

Zona sottostante nella parte centrale n. 1
vano passante da mm. 690x520x350 h.
per alloggiamento ossimetro.

Parte inferiore chiusa perimetralmente su
tre lati. Sul frontale n. 2 cassetti estraibili.
Montaggio su n. 4 ruote Ø 125 antistatiche
di cui n. 2 fisse e n. 2 girevoli con blocco.
Maniglia direzionale in tubo Ø 20.
Dimensioni mm. 750x520x900/250 h.

● **OXIMETER
TROLLEY
DRAWING N° 99CF016**

Made of AISI 304 18/10 stainless steel.
Comprises the following:

Upper part with smooth surface 12/10 thick
complete with support bracket with border.
In the central area of the part below no. 1
690x520x350h mm passing compartment
for housing the oximeter.

Lower part closed externally on three sides.
no. 2 removable drawers in front.
Fitted on no. 4 125 Ø antistatic wheels of
which no. 2 fixed and no. 2 revolving with
brake. 20 Ø tube steering handle.
Size 750x520x900/250h mm.





► **CARRELLO
MATERIALE CHIRURGHI
DISEGNO N. 99CF012**

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304.
Così composto:
Piano superiore liscio spessore 12/10.
Alveare di contenimento a giorno con n. 16 caselle. Zona sottostante perimetralmente chiusa su tre lati. Sul frontale n. 1 cassetto estraibile da mm. 1250x550x150 h. N. 6 cassetti da mm. 600x550x150 h. montaggio su n. 4 ruote Ø 125 di cui n. 2 fisse e n. 2 girevoli. Finitura satinata. Dimensioni mm. 1300x600x820/620 h.

● **SURGICAL
MATERIAL TROLLEY
DRAWING N° 99CF012**

Made of AISI 304 18/10 stainless steel.
Comprises the following: smooth upper surface 12/10 thick. Open honeycomb container area with no. 16 boxes. Area below externally closed on three sides. No. 1 1250x550x150h mm removable drawer in front. No. 6 600x550x150h drawers. Fitted on no. 4 125 Ø wheels of which no. 2 fixed and no. 2 revolving. Brushed finish. Size 1300x600x820/620h mm.

► **CARRELLO E SEDILI**




**CARRELLO PORTACATINI
TRAY TROLLEY**



**SGABELLO GIREVOLE
SWIVEL STOOL**



**SELLINO POUCHET
POUCHET STOOL**

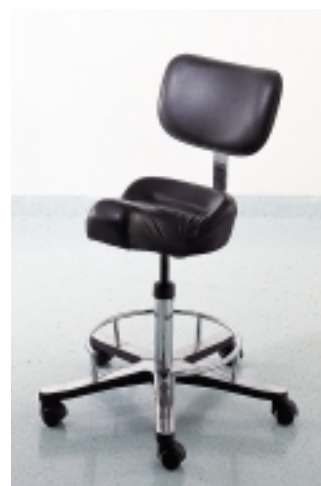

**SEDILE OPERATORE
OPERATING CHAIR**



**SEDILE OPERATORE OLEODINAMICO
OLEODYNAMIC OPERATING CHAIR**

► **CARRELLO
THERMOSTATIC
PORTA FLACONI E
SACCHE PER SANGUE
MODELLO CT/398**

Realizzato integralmente in acciaio inox 18/10 AISI 304. Il carrello ha in dotazione n. 1 piano divisorio interno (divisorio tipo "A") che consente il trasporto dei flaconi; e una vaschetta per il trasporto di sacche per sangue (divisorio tipo "B"). L'utente può scegliere di volta in volta il piano che vuole utilizzare secondo le sue esigenze, essendo i due piani intercambiabili. I piani sono appoggiati sul fondo della vasca. Capacità divisorio tipo "A":

N. 16 flaconi ml. 500 (oppure ml. 250) + n. 9 flaconi ml. 100.

Capacità divisorio tipo "B":

n. 14 circa sacche per sangue.

Il riscaldamento del vano è effettuato con una resistenza corazzata a bagnomaria di potenza 600 Watt 220Volt. La temperatura in vasca è regolata da un termoregolatore elettronico.

Dimensioni mm. 660x460x850 h.

● **MODEL CT/398
THERMOSTATIC
TROLLEY FOR
BLOOD FLASKS
AND BAGS**

Totally made of AISI 304 18/10 stainless steel. The trolley is fitted with no. 1 inner dividing shelf (divider type 'A') for carrying flasks and a tray for carrying blood bags (divider type 'B'). The user can decide each time which divider to use according to requirements, since the two dividers are interchangeable. The dividers rest on the bottom of the trough.

Divider type 'A' capacity:

no. 16 500 ml (or 250 ml) flasks + no. 9 100 ml flasks.

Divider type 'B' capacity:

Approx. no. 14 blood bags.

The compartment is heated by an armoured bain-marie resistance with a power of 600 Watts 220 Volts. The trough temperature is regulated by an electronic device. Size 660x460x850h mm.

